



Breezy 90



Nuestra Breezy más básica

Características Standard

- Estructura de acero plegable
- Tapicería de asiento de nylon con doble tela
- Tapicería de respaldo de nylon con bolsillo trasero
- Ruedas traseras de 24" con radios de acero (macizas o neumáticas) o ruedas traseras macizas de 12"
- Plataformas de composite abatibles con cinta talonera
- Reposabrazos abatibles con almohadillado en forma curva
- Reposapiés abatibles y desmontables (longitud de pierna ajustable de 37 a 46 cm)
- Ruedas delanteras 8" x 1.25" macizas
- Tubos de cola, bomba de inflado y kit de herramientas de serie
- Color: azul



¿Necesitas una silla práctica y funcional? Breezy 90 es tu elección

Breezy 90 es la alternativa más económica de la gama Breezy. Simple y funcional, con todo lo necesario para cubrir las necesidades de usuarios esporádicos u ocasionales de sillas de ruedas, tanto dentro como fuera de casa.

Disponible en versión transit o autopropulsable, Breezy 90 está homologada para usuarios de hasta 125 kg.



Breezy 90 versión transit, con rueda trasera de 12", para usuarios que no se autopropulsan.

Sin complicaciones

Sólo tienes que seleccionar el tamaño de rueda trasera y el ancho de asiento, para conocer tu referencia.

Referencias

Breezy 90 con rueda maciza 24"

Ancho 40 cm - Ref. Breezy90-113

Ancho 42 cm - Ref. Breezy90-114

Ancho 45 cm - Ref. Breezy90-115

Breezy 90 con rueda neumática 24"

Ancho 40 cm - Ref. Breezy90-104

Ancho 42 cm - Ref. Breezy90-105

Ancho 45 cm - Ref. Breezy90-106

Breezy 90 con rueda trasera 12"

Ancho 40 cm - Ref. Breezy90-110

Ancho 42 cm - Ref. Breezy90-111

Ancho 45 cm - Ref. Breezy90-112

Supera tus expectativas

Breezy 90 te sorprenderá por sus detalles: cruceta tubular, tapicería de nylon con doble tela en el asiento para un soporte más firme, bolsillo trasero, longitud de pierna ajustable con bloqueo mediante pomo... La forma curva del reposabrazos proporciona mayor confort al usuario ya que ofrece un mayor soporte del antebrazo. Además incorpora de serie tubos de cola, kit de herramientas, bomba de inflado y bolsillo trasero para transportar objetos. No te conformes con menos!!



Protector lateral abatible, con un atractivo diseño y almohadillado curvo para un mayor confort.



Práctico sistema de ajuste en longitud del reposapiés, con plataformas de composite abatibles y cinta talonera.



Tapicería de nylon que envuelve los tubos del respaldo para incrementar el confort. Con bolsillo trasero para transportar objetos.



Breezy 90

Nuestra Breezy más básica


Breezy 90




40 a 45 cm




40 cm

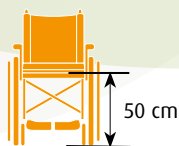


50 cm

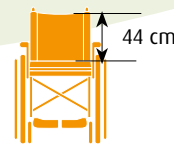

44 cm

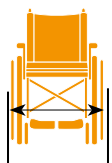


AA + 16 cm (24")
AA + 17,5 cm (12")

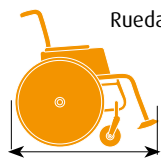


Ruedas 24"

110 cm (con reposapiés)
83 cm (sin reposapiés)

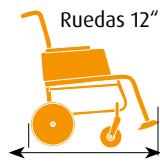

Ruedas 12"

97 cm (con reposapiés)
71,5 cm (sin reposapiés)

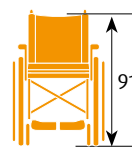

91,5 cm

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	40 / 42 / 45 cm	Color de armazón:	Azul
Profundidad de asiento:	40 cm	Color de la tapicería:	Negro
Altura de asiento:	50 cm	Longitud de pierna:	37 a 46 cm (ajustable)
Altura de respaldo:	44 cm	Peso máximo de usuario:	125 kg
Anchura total:	Ancho de asiento + 16 cm (ruedas 24")	Peso máx*.: 19,45 kg (silla completa 24"), 15,8 kg (silla completa 12")	
Anchura total:	Ancho de asiento + 17,5 cm (ruedas 12")	Peso de la parte mínima más pesada**:	17,65 kg (24"), 14 kg (12")
Longitud total:	110 cm (24") , 97 cm (12")	Anchura plegada:	26,5 cm (ruedas 24"), 28 cm (ruedas 12")
Altura total:	91,5 cm		

* Configuración standard, talla 40 cm

** Sin reposapiés.

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

