


UniX



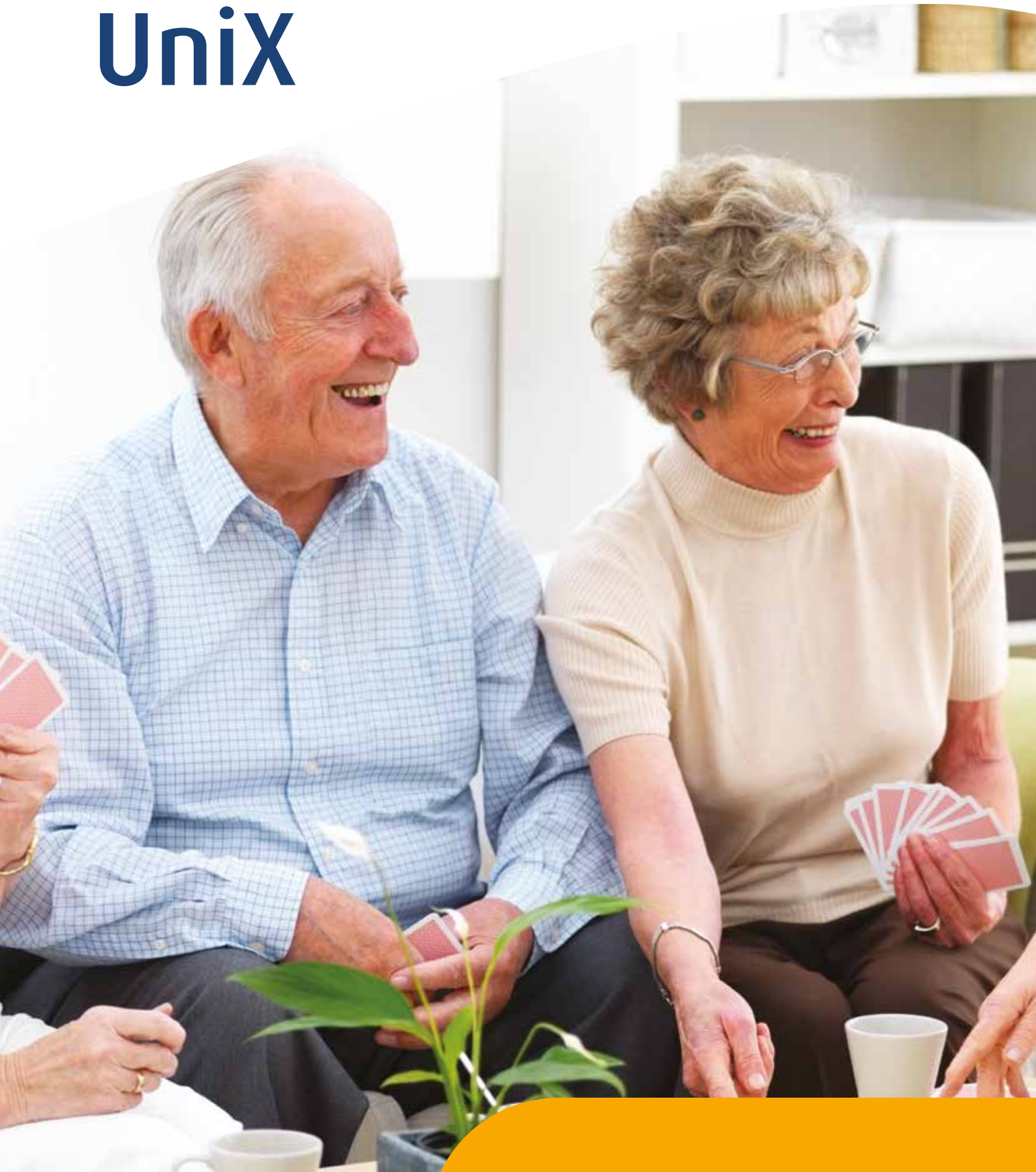

Sencilla y robusta

Características Standard

- Estructura de acero de gran resistencia, plegable
- Tapicería de asiento y respaldo de nylon acolchado
- Respaldo de 43.5 cm (tapicería ajustable a 41 cm)
- Ruedas traseras de 24" con aros de aluminio (macizas o neumáticas) o ruedas traseras macizas de 12"
- Plataformas reposapiés abatibles con cinta talonera
- Reposabrazos abatibles, con almohadillado ajustable en longitud
- Hangers a 70°, abatibles hacia dentro y hacia fuera (longitud de pierna ajustable de 35 a 50 cm)
- Ruedas delanteras de 8" x 1.25" macizas
- Color: gris claro



Fabricada para durar

Unix es sinónimo de resistencia y durabilidad. Por su robusta estructura de acero que garantiza un desempeño todoterreno en el día a día, porque está testada para el transporte en vehículos y homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Unix te lo pone fácil

Configurarla te resultará más fácil imposible. Simplemente tienes que seleccionar un modelo (con rueda trasera grande o rueda trasera pequeña) y la anchura de asiento que necesitas. Así de sencillo!!



Referencias

UniX con rueda maciza 24"

Ancho 41 cm - Ref. 067000-017

Ancho 44 cm - Ref. 067000-018

Ancho 47 cm - Ref. 067000-019

UniX con rueda neumática 24"

Ancho 41 cm - Ref. 067000-013

Ancho 44 cm - Ref. 067000-014

Ancho 47 cm - Ref. 067000-015

UniX con rueda trasera de 12"

Ancho 41 cm - Ref. 067013-001

Ancho 44 cm - Ref. 067013-002

Ancho 47 cm - Ref. 067013-003

Unix con rueda trasera de 12", para usuarios que no se autopropulsan.

Ajustes cómodos y sencillos

Este mismo concepto de simplicidad aplica también a los ajustes en la profundidad del reposabrazos, la longitud de pierna y la altura del respaldo. Unix incorpora un práctico sistema para regular la longitud del reposapiés con múltiples orificios a lo largo del tubo para un ajuste más sencillo y preciso. Con cinta talonera para un soporte más confortable y kit de herramientas de serie.



Reposabrazos abatibles con almohadillado ajustable en profundidad (2 posiciones)



Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera con desenclavador ergonómico, robusto y accesible. Ajustables en longitud de 35 a 50 cm.



Tapicería acolchada de nylon, ajustable a 43,5 o 41 cm para un mayor confort.



UniX

Sencilla y robusta


UniX:




41 a 47 cm



42 cm

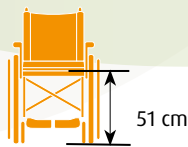


51 cm

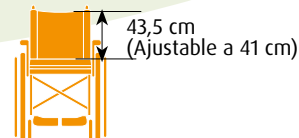

43,5 cm
(Ajustable a 41 cm)



AA + 18,5 cm (24")
AA + 14,5 cm (12")

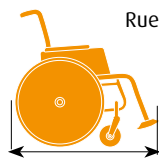


Ruedas 24"

108 cm (con reposapiés)
81 cm (sin reposapiés)



Ruedas 12"

103 cm (con reposapiés)
75 cm (sin reposapiés)

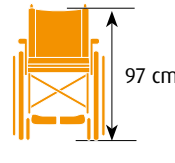

97 cm

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	41 / 44 / 47 cm	Color de armazón:	Gris claro
Profundidad de asiento:	42 cm	Color de la tapicería:	Negro
Altura de asiento:	51 cm	Longitud de pierna:	35 a 50 cm (ajustable)
Altura de respaldo:	43,5 cm (tapicería ajustable a 41 cm)	Peso máximo de usuario:	125 kg
Anchura total:	Ancho de asiento + 18,5 cm (ruedas 24")	Peso máx*.:	17,8 kg (silla completa 24"), 17,5 kg (silla completa 12")
Longitud total:	108 cm (24"), 103 cm (12")	Peso de la parte mínima más pesada**:	16 kg (24"), 15,2 kg (12")
Altura total:	97 cm	Anchura plegada:	32 cm (ruedas 24"), 30 cm (ruedas 12")
Ángulo de asiento:	Fijo a 3°	Radio de giro:	desde 85 cm

* Configuración standard, talla 41 cm

** Sin reposapiés

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.4- Febrero 2017